

perfect  
**BEAUTY**

**MDS**  
PHARM 



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОЗНАКОМТЕСЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

## КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО:



1  
Подключите устройство к электродам



2  
Разместите электроды на участок лица или тела, который хотите стимулировать



3  
Нажмите и удерживайте кнопку ON, чтобы включить устройство



4  
Выберите программу, нажимая кнопку P



5  
Отрегулируйте интенсивность работы для каждого электрода



6  
Нажмите и удерживайте кнопку OFF, чтобы выключить устройство

Уважаемый клиент,

Спасибо, что выбрали **perfect BEAUTY**.

## ОПИСАНИЕ РАБОТЫ И ПРИНЦИПЫ

Perfect BEAUTY - это мощный стимулятор мышц, который используется для тонизирования и коррекции фигуры, а также для уменьшения морщин.

Он посылает небольшую и нежную стимуляцию (аналогичную вашим естественным нервным импульсам) в мышцы, которая передается через две или четыре самоклеющиеся электродные накладки, чтобы помочь вам укрепить и тонизировать ваше тело, а также сохранить вашу молодость.

Вы можете воспользоваться индивидуальными программами для каждой конкретной области: лицо, пресс, ягодицы и бедра, бедра, бюст, руки и икры.



**Важно:** Не используйте perfect Beauty для детей без консультации с врачом.

### ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- **НЕ используйте**, если у вас есть кардиостимулятор (или если у вас есть проблемы с сердечным ритмом) или другие электронные медицинские устройства. *Использование данного устройства с электронными*

*медицинскими устройствами может привести к ошибочной работе устройства. Стимуляция в непосредственной близости от имплантированного устройства может повлиять на работу некоторых моделей. Стимуляция на передней части шеи может повлиять на частоту сердечных сокращений. Очень сильная стимуляция через грудную клетку может вызвать учащенное сердцебиение.*

- **НЕ используйте** в течение первых трех месяцев беременности. *Неизвестно, может ли стимулятор влиять на развитие плода.*
- **НЕ используйте** на животе на поздних сроках беременности. *Немедленно прекратите использование, если у вас возникли неожиданные схватки.*

### ВАЖНО:



**НЕ используйте** во время вождения, эксплуатации оборудования, или аналогичных действия, требующих мышечного контроля. *Незакрепленные электродные накладки, поврежденные провода, или внезапные изменения в контакте могут вызвать краткие произвольные мышечные движения*



**НЕ используйте** для маскировки или облегчения не диагностированной боли. *Это может задержать диагностику прогрессирующего состояния.*



**НЕ используйте** если у вас есть, или происходит лечение: активный или подозрение на рак, или не выявленная боль с раком в анамнезе. *Следует избегать стимуляции непосредственно через подтвержденную или подозреваемую злокачественную опухоль, поскольку она может стимулировать рост и способствовать распространению раковых клеток.*

## ИНФОРМАЦИЯ О НАСТРОЙКАХ ПРОГРАММЫ

Каждая программа представляет собой сбалансированное сочетание тонизирования, укрепления и формирования, специально разработанная для определенной группы мышц.

## ПРОГРАММЫ

	Программа	Группа мышц	Описание	Особая функция
1	ЛИЦО 1	Быстрое тонизирование лица	Помогает тонизировать, укрепить и подтянуть мягкие ткани лица, противодействуя старению.	<b>Интенсивность ограничена до 40 мА.</b> Используйте с электродными накладками (см. E-SM3050)
2	ЛИЦО 2	Глубокое тонизирование лица	Для сохранения молодости, рекомендуется стимулировать лицевые мышцы и кожу, чтобы улучшить кровообращение, помочь активировать фибробласты, которые вырабатывают коллаген и эластин также тонизировать вялые и провисшие мышцы лица.	<b>Интенсивность ограничена до 40 мА.</b> Используйте с электродными накладками (см. E-SM3050)
3	ПРЕСС	Живот	Подходит для людей, которые хотят тонизировать и придать форму своему телу, чтобы получить более тонкий силуэт и повысить общий уровень физической подготовки.	
4	ТАЗ	Ягодицы и бедра		
5	БЕДРА	Бедра		

6	<b>БЮСТ</b>	<b>Бюст / Грудные мышцы</b>	Для женщин с обвисшими мышцами и накоплением жира в области бюстгальтера.	Можно использовать с электродными накладками* (см. E-CMR60130) для улучшенного комфорта. * Продается отдельно.
7	<b>РУКА</b>	<b>Руки</b>	Наши предплечья часто в плохой форме, обычно из-за недостатка движения и мышечной работы. Эта программа предназначена для укрепления и наращивания мышц.	Повышение кровообращения для улучшения тонуса и внешнего вида кожи.
8	<b>ИКРЫ</b>	<b>Ножные икры</b>	Это, как правило, отсутствие тренировок ног, которые нас тревожат больше всего. Целенаправленные тренировки мышц для икр ног очень просты в выполнении.	



**Примечание:** эти программы должны использоваться в сочетании со здоровой диетой.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММ

### ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦА

Программы ЛИЦО 1 и ЛИЦО 2 - это неинвазивный вариант, помогающий поднять и / или подтянуть мягкие ткани лица, повысить тонус мышц лица и уменьшить признаки старения.

**Рекомендуемое использование:** Один сеанс лечения ежедневно, 5 дней в неделю, в течение 12 недель. Вы можете заметить некоторые положительные эффекты уже после одного сеанса, но обычно требуется около 6 недель, прежде чем вы заметите разницу.



Как правило, 3 сеанса в неделю в течение периода от 4 до 6 недель дают хорошие начальные результаты в зависимости от формы тела, тонуса, спортивных тренировок или потребностей в реабилитации и восстановлении.

### РЕКОМЕНДАЦИИ

- Поставляемые электродные накладки предназначены для многократного использования, но для использования одним пациентом.
- Для достижения наилучшей проводимости через электродные накладки всегда следите за тем,

- чтобы они были в хорошем состоянии и были липкими.
- Перед использованием убедитесь, что ваша кожа чистая и сухая.
  - Снимите электродные подушки с их защитного пластикового экрана, удерживая и поднимая один угол подушки и вытягивая. **Не тяните** за провода.
  - После использования всегда заменяйте электродные накладки на пластиковые вкладыши и помещайте их в повторно закрываемый пластиковый пакет.
  - Если электродные подушки высыхают, лучше всего купить сменный пакет В чрезвычайной ситуации может быть возможно восстановить некоторую липкость подушки, добавив крошечную каплю воды на каждую подушку и распределив ее вокруг. Если добавить слишком много воды, электродная подушка станет слишком мягкой. Если это произойдет, то предлагается попытаться восстановить некоторую адгезивность и поместить их липкой стороной вверх в холодильник на несколько часов.
  - В очень жаркую погоду гель на электродах может стать мягким. В таких случаях положите их на свои пластиковые вкладыши и в сумку, спрячьте в холодильник. Оставьте там, пока они не вернуться в нормальное состояние.
  - Предусмотренные электродные накладки не содержат латекса.
  - Замените электродные накладки, когда они теряют липкость.  
*Плохое соединение может вызвать дискомфорт и раздражение кожи.*
- Срок хранения неоткрытой упаковки электродных накладок составляет 2 года. На это могут повлиять очень высокие температуры или очень низкая влажность.

## РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОДА


Расположение электродных подушек зависит от используемой программы. Пожалуйста, обратитесь к руководству по размещению ниже.



**Примечание:** Подушку электрода «+» необходимо подключить к разъему для **красного провода**, символ «-» относится к разъему для **черного провода**.

### ЛИЦО 1 и ЛИЦО 2 – размещение накладок



Лицевые электроды одновременно стимулируют все мышцы на лице.

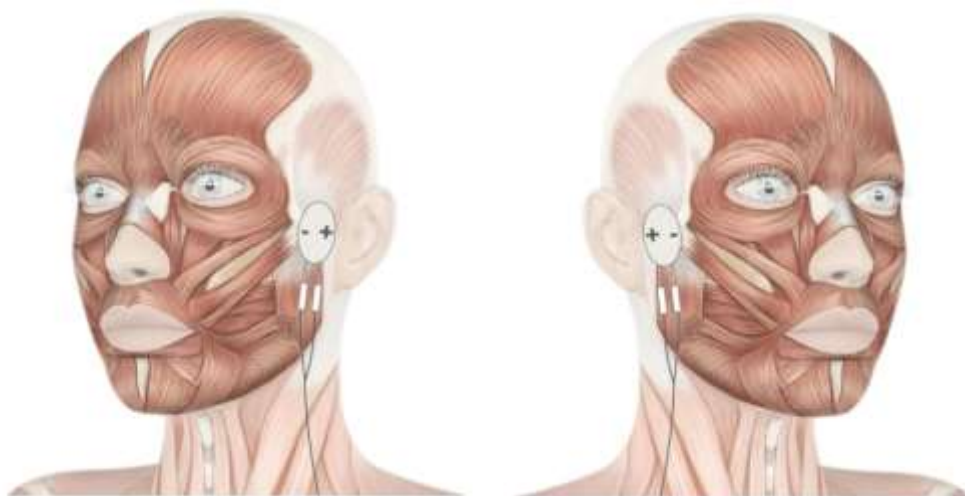


ПРЕСС – Размещение 1

ИЛИ

ПРЕСС – Размещение 2

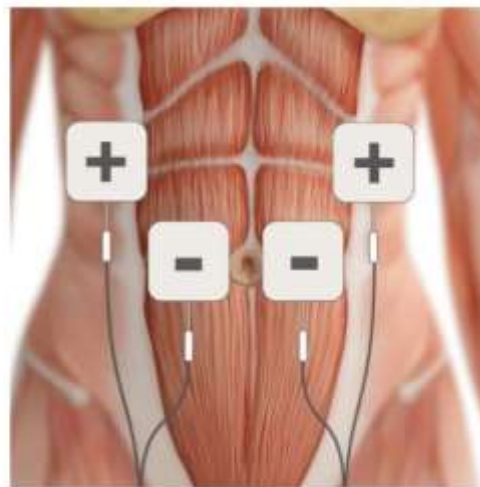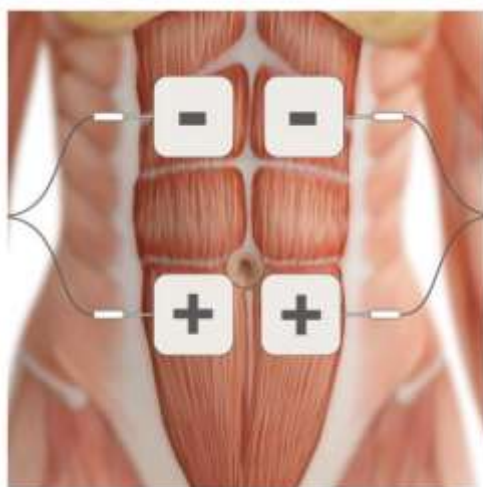


**ТАЗ – Размещение накладок**

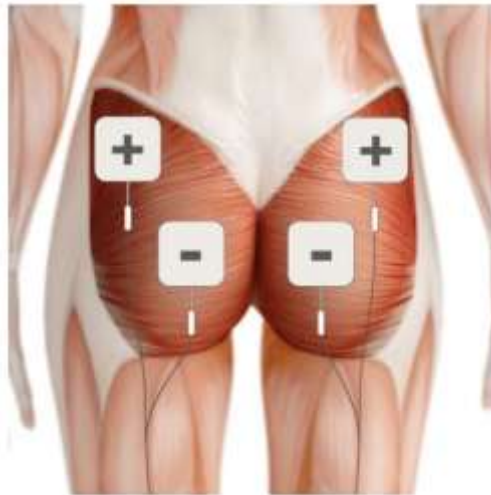

**БЕДРА – Размещение 1**



ИЛИ

**БЕДРА – Размещение 2**

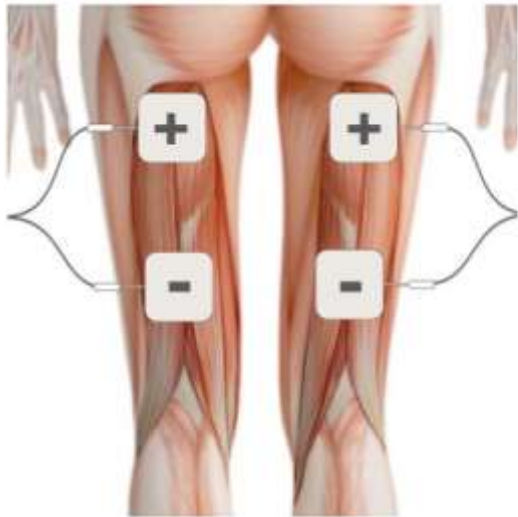


**БЮСТ – Размещение 1** ИЛИ

**БЮСТ – Размещение 2 с  
дополнительными накладками на нагрудные электроды (E-CMR60130)**

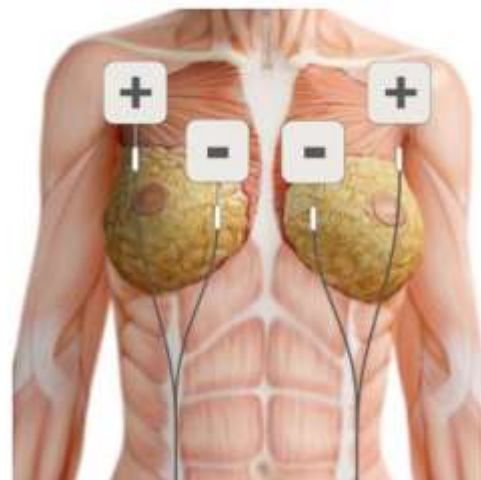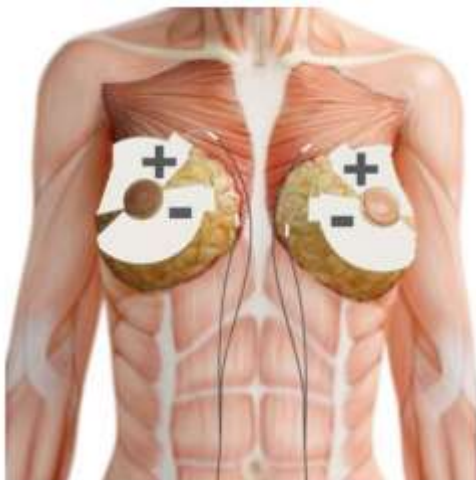




**РУКИ – Размещение 1**

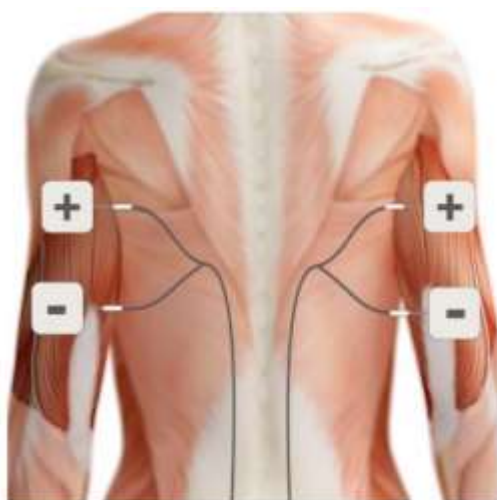


ИЛИ

**РУКИ – Размещение 2**

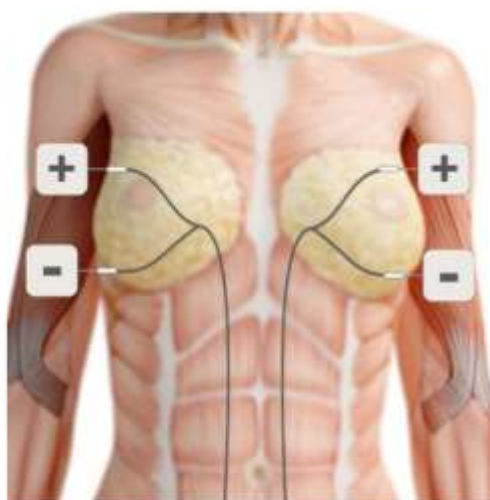



**ИКРЫ – Размещение**

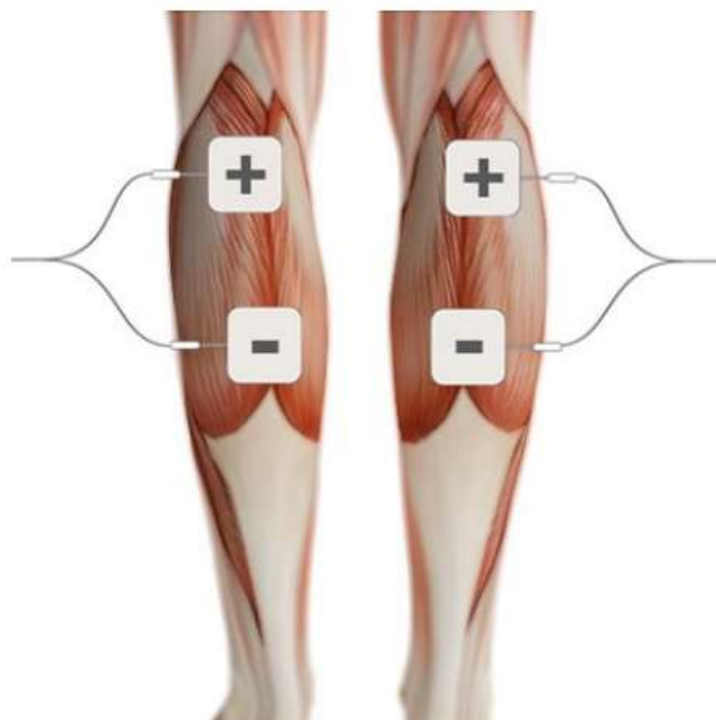

# УПРАВЛЕНИЕ БЛОКОМ

## ON/OFF

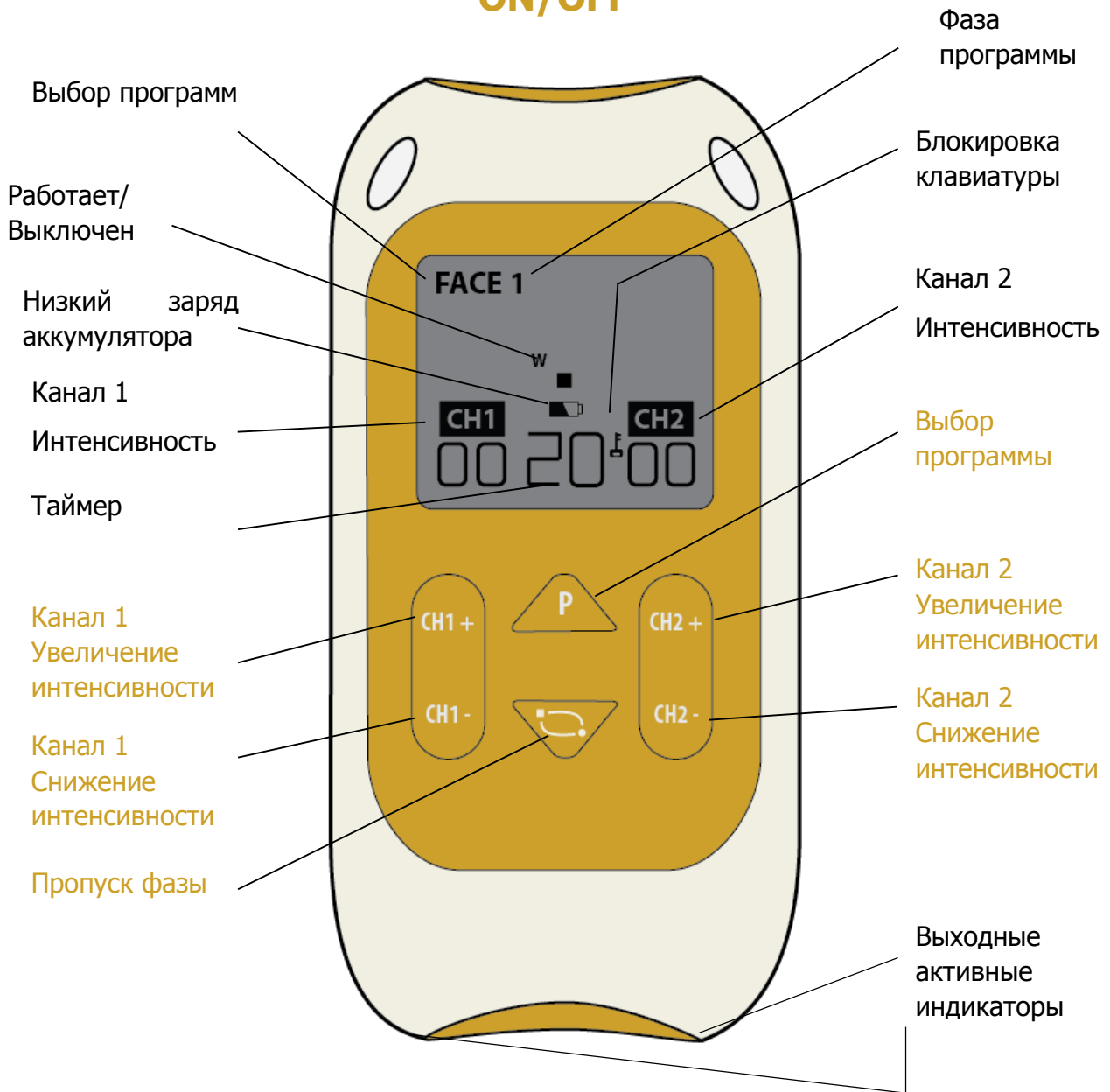

**SCREEN DISPLAY**  
**W** = "Work Mode"  
**R** = "Rest Mode"  
 = "Low Battery Warning"

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


---




**ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ**

### КОНТРОЛЬ ИНТЕНСИВНОСТИ

Кнопки отмеченные **CH1+**, **CH1-**, **CH2+**, **CH2-** регулируют интенсивность.

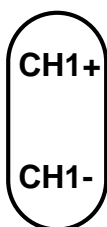

Левые кнопки изменяют силу в левом отведении CH1, а правые кнопки изменяют правый отвод CH2.

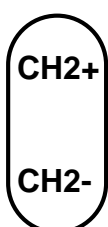

### НИЗКИЙ ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА



Пустой символ батареи покажет, когда вам нужно заменить батареи. Устройство выключится примерно через 2 минуты после этого.

### БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ



Если вы не будете нажимать клавиши в течение 30 секунд, клавиатура заблокируется, так что будут работать только клавиши с маркировкой CH1 или CH2. Это сделано для того, чтобы избежать случайных изменений в настройках. Чтобы разблокировать, нажмите клавиши CH1- или CH2-.

## ГАРАНТИЯ

---

Эта гарантия относится только к устройству. Она не покрывает электродные прокладки, аккумулятор или подводящие провода.

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

---

Если ваш **perfect BEAUTY** не работает должным образом, проверьте следующее:

Проблема	Возможные причины	Решение
<b>Не работает экран</b>	Закончился заряд аккумулятора.	Поменяйте аккумулятор.
	Аккумулятор установлены неправильно.	Удалите полиэтиленовую пленку. Проверьте + / - .
	Поврежденные пружины в аккумуляторном отсеке.	Свяжитесь с поставщиком.
<b>Низкий уровень заряда аккумулятора</b>	Низкий уровень заряда батареи аккумулятора.	Поменяйте аккумулятор.
<b>Нет ощущений</b>	Интенсивность не достаточно сильна.	Увеличьте силу. Большинство пользователей чувствуют что-то при настройке ниже 20 мА.
<b>Выход не будет увеличиваться выше нуля</b>	Работа выключателя с открытой цепью. Свинец не подключен к корпусу или неисправен / поврежден.	Убедитесь, что стимулятор правильно прикреплен к вашему телу. Попробуйте использовать второй подводный провод. При необходимости замените попку.
	(Выводные провода могут сломаться на изгибе, где они выходят из стимулятора, не давая или прерывая импульс).	
<b>Внезапное изменение ощущения</b>	Если вы отключите и снова подключитесь через несколько минут, сигнал будет ощущаться намного сильнее.	Всегда возвращайте силу к нулю после отсоединения проводов или электродных подушек.

Если приведенный выше обзор не смог решить вашу проблему, позвоните дистрибьютору (адрес указан на задней обложке) для получения консультации.

Обратитесь в службу поддержки клиентов TensCare по телефону +44 (0) 1372 723 434. Наши сотрудники обучены помогать вам в большинстве проблем, с которыми вы могли столкнуться, без необходимости отправлять ваш продукт для обслуживания.

Distributed by:



Manufactured by:

TensCare Ltd, 9 Blenheim Road,  
Epsom, Surrey KT19 9BE, UK  
Tel: +44(0) 1372 723434  
[www.tenscare.co.uk](http://www.tenscare.co.uk)

**TensCare™**

