

«Наколенник-нейростимулятор» для самостоятельных физиотерапевтических процедур при травмах и заболеваниях коленного сустава

«Наколенник-нейростимулятор» - физиотерапевтический прибор, действие которого основано на методике нейростимуляции - лечебном воздействии на пораженную зону слабыми импульсами низкой частоты.

Показания к применению:

- остеоартриты и артрозы коленного сустава
- боль, скованность движений, опухание колена
- растяжения и разрывы связок
- травмы мениска
- реабилитация после операций на коленном суставе
- последствия инсульта (постинсультные артропатии)
- переломы и другие механические повреждения коленного сустава
- для профилактики и предупреждения развития хронических заболеваний

Ввод в эксплуатацию устройства для выработки лечебных импульсов - «Нин-ТЕНС»:


1. Вставьте батарею в отсек для батарейки на задней панели прибора (можно использовать также перезаряжаемые никель-металлогидридные аккумуляторы).
2. Подключите один или два электрода в разъемы каналов 1 и 2 (по необходимости).
3. Включите устройство, нажав и удерживая кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.
4. Выберите нужную программу с помощью кнопки PRG.
5. Нажмите кнопку TIME, чтобы выбрать нужное время.
6. Уменьшение или увеличение интенсивности воздействия регулируется по необходимости, в зависимости от канала или каналов, который вы выбрали для работы.
7. Для выключения устройства необходимо нажать на кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.



Утверждено Министерством
Здравоохранения Израиля. Лицензия
Европейского Союза

Инструкция по применению

1. Убедитесь, что "Нин-ТЕНС" выключен
2. Подключите парный соединительный кабель к каналу 1 прибора "Нин-ТЕНС"
3. К одному из штекеров парного соединительного кабеля подсоедините провод от наколенника, а к другому провод от вспомогательного электрода.
4. Убедитесь, что провода вставлены плотно, чтобы не был виден голый металл контактов.
5. Убедитесь, что кожа ноги сухая и чистая
6. Наденьте на ногу наколенник и укрепите вспомогательный электрод (наколенник должен плотно прилегать к ноге).
7. Включите "Нин-ТЕНС", нажав и удерживая кнопку ВКЛ./ВЫКЛ.
8. Выберите нужную программу с помощью кнопки PRG. Существует 4 вида программ, каждый из которых имеет 2 или 3 режима с разными частотой и длительностью генерируемого импульса:
 - CON 1-3 (CONTINUES) - постоянное воздействие, рекомендуется при острой боли;
 - BST 1-2 (BURST) - импульсное воздействие, рекомендуется при хронических болях;
 - MOD 1-3 (MODULATION) - переменное воздействие, сочетает постоянное и импульсное воздействие с целью предотвратить привыкание нервных окончаний к процедуре;
 - MEM 1-3 - программы ручной настройки, позволяет самостоятельно настроить все параметры импульса.
9. Установить время работы прибора, нажимая на кнопку TIME. Можно выбрать процедуру продолжительностью 15, 30, 45, 60 минут.
9. Используя кнопки "+" и "-" установите комфортную для вас мощность импульса. Со временем вы сможете ее увеличивать, чтобы усилить воздействие.

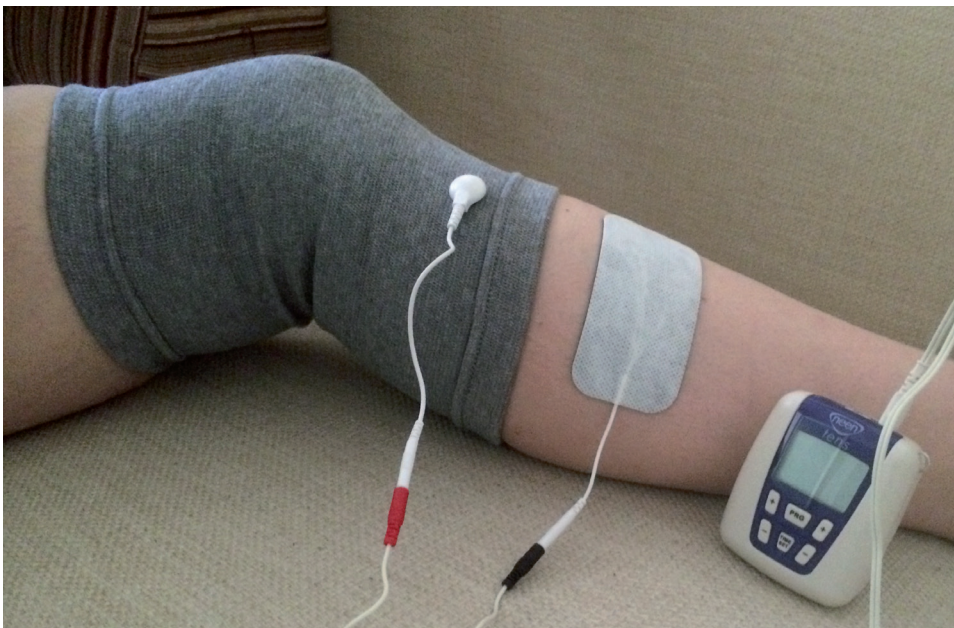

Общие меры предосторожности:

- Не погружайте прибор "Нин-ТЕНС" в воду.
- Не подвергайте прибор "Нин-ТЕНС" воздействию высокой температуры.
- Выньте батарейки, если устройство "Нин-ТЕНС" не используется в течение длительного времени.
- Не проводите процедуры во время сна.
- Держите "Нин-ТЕНС" вдали от источников магнитного поля, таких как телевизоры, микроволновые печи, духовки и колонки. Их магнитное поле может повлиять на экран прибора.
- В случае необходимости наколенник можно стирать вручную и сушить на полотенце. Не используйте стиральную и сушильную машины.

Противопоказания:

Не используйте прибор в следующих случаях:

- Если у вас есть кардиостимулятор или серьезная проблема нарушения сердечного ритма.
- Если у вас высокая температура, инфекция или опухоль.
- Во время эксплуатации электрооборудования.
- Если вы страдаете или страдали в прошлом эпилепсией.
- Запрещено размещать электроды на открытую рану, потрескавшуюся кожу или участок тела, потерявший чувствительность.

Гарантия: 1 год с момента приобретения, распространяется только на приборы, которые эксплуатировались в соответствии с инструкцией, не были изменены и не ремонтировались людьми, не уполномоченными компанией. Для того, чтобы задействовать гарантию в случае неисправности прибора, необходимо вернуть его по адресу: עבור מ.ד.ס. פארם, ת.ת. 411 מיקוד 4610302, הרצליה פיתוח